




Fisio Gun Prime

PISTOLET DE MASSAGE À 4 VITESSES

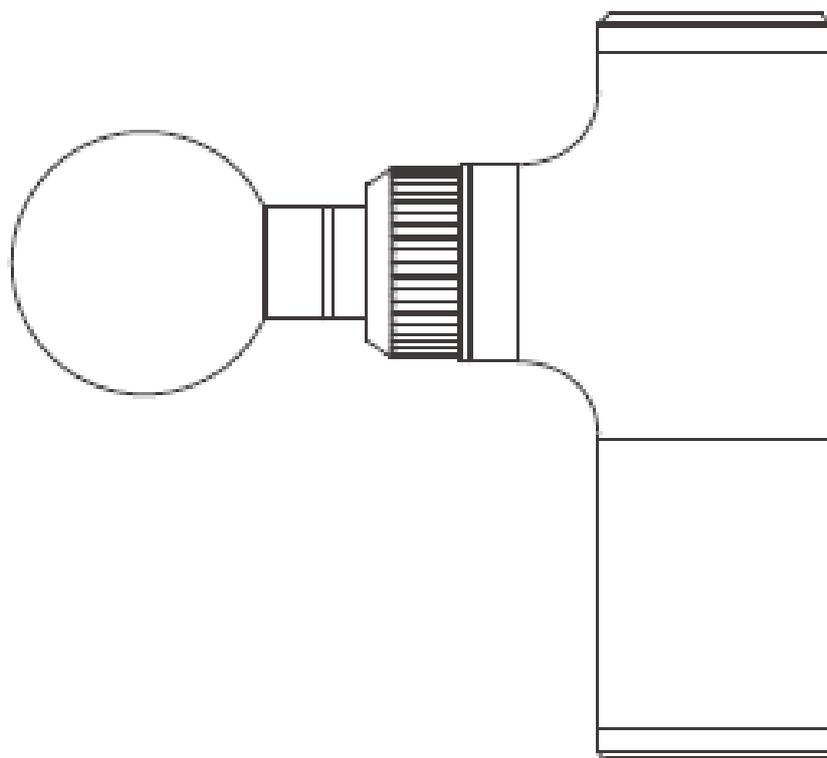

**MANUEL
D'UTILISATION**

I. Composants du produit:

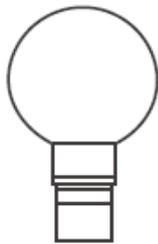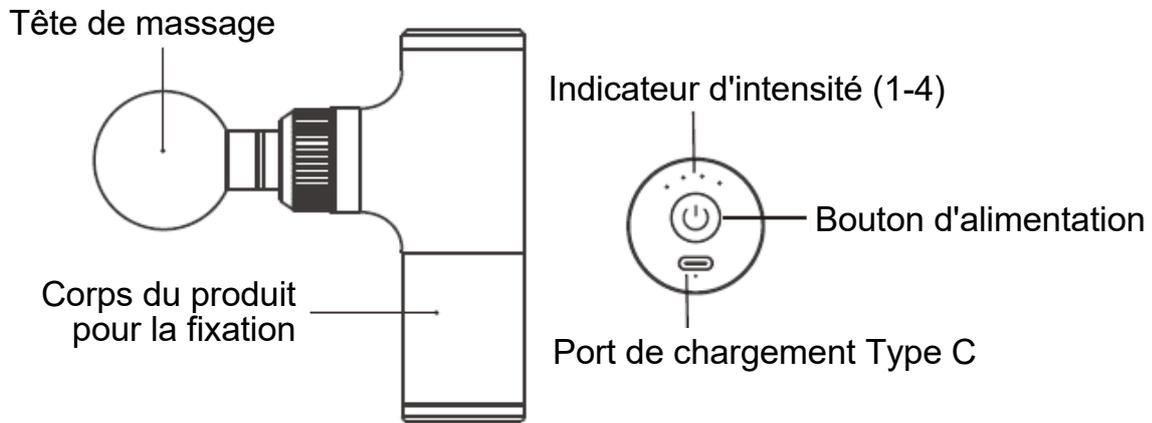

Tête sphérique:
Pour le massage des bras, du dos, des fesses, des cuisses et des mollets.



Tête en U:
Pour le massage du cou, du dos, du tendon d'Achille.



Tête en forme de balle:
Pour le massage des tissus profonds.



Tête plate:
Pour la relaxation de toute partie de la musculature.

II. Mode d'emploi

1. Placez délicatement la tête souhaitée dans le boîtier.
2. Appuyez sur le bouton d'alimentation pendant 3 secondes pour l'allumer.
3. Le produit possède 4 niveaux d'intensité.
 - Il s'allume toujours au niveau 1.
 - Sélectionnez le niveau d'intensité souhaité (1 à 4) par un bref clic sur le bouton d'alimentation.



Le produit s'arrête automatiquement après 10 minutes. Si vous souhaitez continuer à l'utiliser, appuyez à nouveau sur le bouton d'alimentation pendant 3 secondes. Pour l'éteindre, appuyez également pendant 3 secondes.


Indicateur d'intensité: Les 4 LED situées au-dessus du bouton d'alimentation s'allument une à une pour indiquer le niveau d'intensité actuel.

Indicateur d'intensité.



Comment changer le type de tête:

- Assurez-vous que l'appareil est éteint.
- Pour installer la tête, tenez le corps de votre Fizio Gun Prime et appuyez doucement pour la mettre en place.
- Pour retirer la tête, saisissez le corps de votre Fizio Gun Prime et tirez doucement sur la tête pour l'enlever.

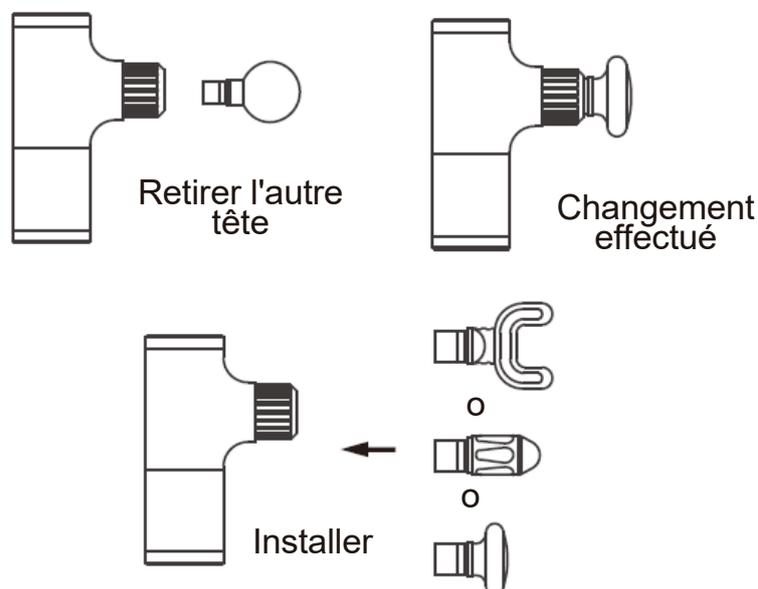


V. Caractéristiques

- Soulage la douleur et les spasmes causés par les contusions, les foulures et les entorses musculaires. - Réduit l'inflammation et l'accumulation d'acide lactique.
- Soulage la fatigue musculaire.

VI. L'utilisation est interdite dans les cas suivants

- Enceinte.
- Personnes souffrant de problèmes cardiaques ou portant un stimulateur cardiaque.
- Souffrant de diabète, d'épilepsie, de cancer, de phlébite ou de thrombose.
- Dysfonctionnement des articulations, faiblesse des os, ostéoporose ou déviation de la colonne vertébrale.
- Ne pas utiliser sur le tibia, le dos du pied et les mains.
- Utilisation non recommandée si vous avez des broches, des vis ou des articulations artificielles dans votre corps.

VII. La boîte contient:

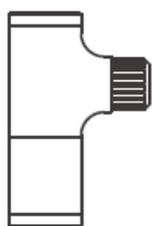

Pistolet de massage



Câble de charge USB à Type C



Un étui de voyage



Tête à boule



Tête en U



Tête en forme de balle



Tête plate

III. Chargement de la batterie

1. Chargez complètement le produit avant la première utilisation. Le temps recommandé pour la première charge est de 5h.


- Led rouge : Chargement
- Led verte : La batterie est chargée

2. Pour protéger la durée de vie de la batterie : Lorsque la LED clignote en rouge, mettez-la en charge immédiatement.

- Une charge complète vous donnera jusqu'à 5 heures d'utilisation, bien que cela dépende toujours des niveaux d'intensité utilisés.

3. pendant l'utilisation, l'indicateur LED de l'état de la batterie vous donnera les informations suivantes :

- Plus de 70 % de la charge : le voyant vert clignote 3 fois toutes les 5 secondes.
- Moins de 70 % de la charge : le voyant vert clignote 2 fois toutes les 5 secondes.
- Moins de 30 % de charge : le voyant vert clignote une fois toutes les 5 secondes.
- Lorsque la charge de la batterie est inférieure à 10 %, le voyant se met à clignoter en rouge.

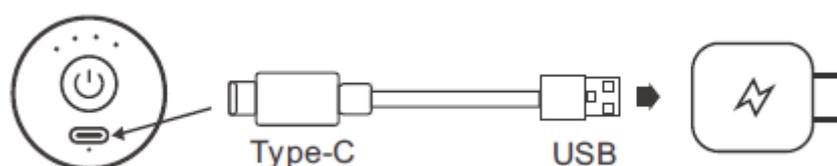

IV. Spécifications

DIMENSIONS	140 x 48 x 90 mm
POIDS	430 gr
TYPE DE BATTERIE	Li-on
DURÉE DE VIE DE LA BATTERIE	4h
TEMPS DE CHARGE	5h
IMPUTATIONS	5V — 2A

VIII. Garantie

Nous garantissons que le produit est exempt de défauts de fabrication pendant une période de 2 ans à compter de la date de vente.

La garantie ne couvre pas:

- Les dommages au produit dus à une mauvaise utilisation ou à une utilisation excessive. Elle ne couvre pas la garantie si le produit est utilisé avec des accessoires non inclus dans cette boîte.
- Si le produit est manipulé par du personnel extérieur à notre service technique.
- Si le produit est mouillé ou immergé dans l'eau ou tout autre liquide.

ATTENTION:

Assurez-vous que vous pouvez utiliser ce produit avant de l'utiliser si vous souffrez d'une quelconque blessure ou maladie. Il est de la responsabilité de l'utilisateur d'utiliser ce produit de manière responsable et de demander à votre médecin si vous pouvez utiliser ce type de produit.

IMPORTÉ ET DISTRIBUÉ PAR:

Sistemas Avantia s.l.

CIF: B85859692

Clara del Rey 55.

28020 Madrid

info@sistemasavantia.com