



# Fisio Gun Pro

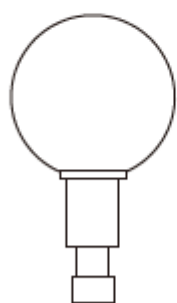


**MANUALE UTENTE**

# I. Componenti del prodotto

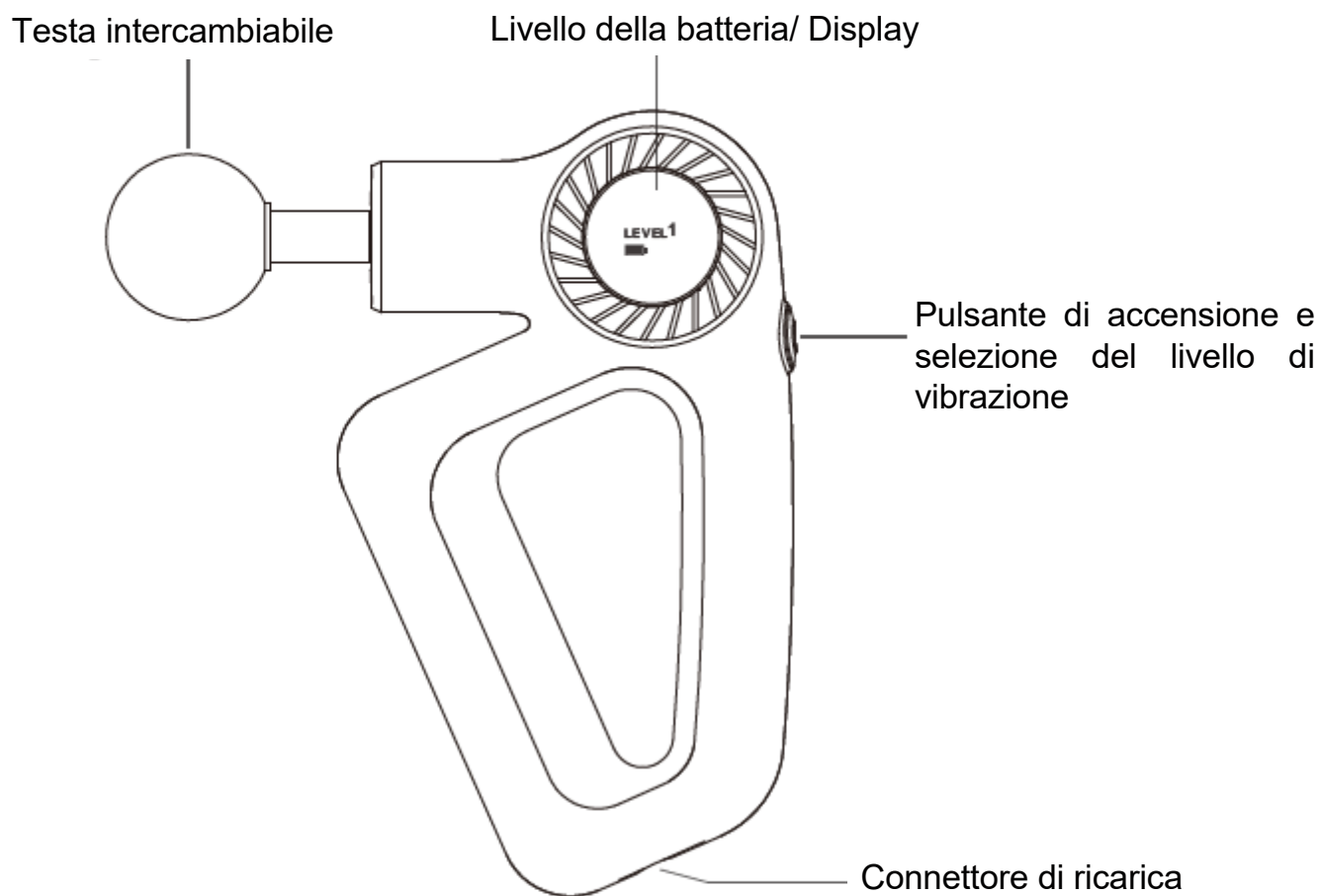


Testa a sfera

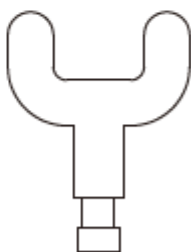

Testa a U



Testa a proiettile

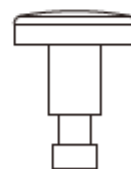

Testa piatta

## II. Istruzioni di sicurezza

- Da utilizzare su adulti. Non adatto agli anziani.
- In caso di infortunio, questo prodotto può essere utilizzato da un professionista solo se ritiene che possa contribuire a migliorare la lesione. Non utilizzare mai da soli in caso di infortunio.
- Per essere efficace, il prodotto deve essere utilizzato in movimento sull'area interessata; non utilizzarlo sempre nello stesso punto, ma muoverlo in piccoli cerchi.
- Non utilizzare sul tessuto muscolare leso.
- Non utilizzare sul cranio, sulla zona ossea o su qualsiasi parte dura del corpo.
- Utilizzare solo su aree muscolari asciutte e pulite.
- Tenere le dita e i capelli lontani dalla base della testa per evitare di essere schiacciati dal movimento del motore.
- Non utilizzare il prodotto su aree poco muscolari o su aree ossee come tibia, dorso delle mani, parte superiore del piede, direttamente sulla colonna vertebrale o su qualsiasi parte del cranio. **L'USO DIRETTO SU OSSA DEBOLI PUÒ CAUSARE FRATTURE.**
- Non utilizzare su aree sensibili come occhi, denti, petto, sterno, genitali, ecc....




Chiunque: Sono incinte o hanno partorito da poco, hanno problemi cardiaci o pacemaker, soffrono di diabete, crisi epilettiche, tumori, cancro, flebiti e/o trombosi, disfunzioni articolari, infiammazioni o lesioni, ossa deboli, osteoporosi, febbre alta, colonna vertebrale anormale o curva, con coaguli di sangue, con spine/viti o con impianti articolari artificiali o altri dispositivi impiantati nel corpo, che stanno ricevendo cure mediche per lesioni. Tutti questi soggetti non devono utilizzare questo prodotto.

- Se l'uso del prodotto irrita la pelle, interromperlo immediatamente o esercitare una minore pressione sulla zona da rilassare.
- Interrompere l'uso del prodotto se si avverte dolore e consultare il medico per risolvere il problema.
- Questo prodotto è concepito per l'uso domestico e il rilassamento muscolare. Non è inteso come sostituto delle cure mediche. In caso di dolore, consultare il medico prima di utilizzare questo prodotto.
- Non utilizzare testine non incluse nel kit.
- Non smontare o tentare di riparare il prodotto. In caso contrario, ci si espone a possibili scosse elettriche. Il prodotto può essere riparato solo dal nostro servizio di assistenza.
- Questo prodotto non è impermeabile, quindi non esporlo a getti d'acqua, non immergerlo e non pulirlo con molta acqua. Per pulirlo, utilizzare un panno leggermente umido e poi passarlo con un panno completamente asciutto.
- Non bloccare le prese d'aria del prodotto mentre è in funzione.
- Non lasciare mai il prodotto incustodito mentre è in carica. Se non si è presenti, staccare la spina. Una volta caricato, scollegarlo dal caricatore.


- Non lasciare il prodotto in luoghi caldi o al sole per lunghi periodi di tempo.
- Non utilizzare il prodotto ininterrottamente per più di 30 minuti. Quando è in uso, lasciare riposare il motore per tutto il tempo in cui è stato usato prima di utilizzarlo di nuovo. In questo modo si prolunga la durata del prodotto.
- Utilizzare il prodotto solo per l'uso descritto nel presente manuale.
- Le riparazioni effettuate al di fuori del servizio di assistenza possono essere dannose per l'utente e invalidare la garanzia del prodotto.

## III. Modalità di funzionamento

1. Caricare completamente il prodotto prima dell'uso. La ricarica completa può richiedere fino a 5 ore.
2. Per accenderlo, premere il pulsante di accensione per 3 secondi e il prodotto si accenderà.
3. Ci sono 9 livelli di intensità regolabili premendo il pulsante di accensione con un "breve clic". Quando si raggiunge il livello 9, se lo si preme di nuovo si passa al livello 1.
4. Dopo 15 minuti di utilizzo ininterrotto si arresta automaticamente. Questa funzione di protezione non può essere disattivata. Se si desidera continuare a utilizzarlo, premere nuovamente il pulsante di accensione per 3 secondi e ricordarsi di non utilizzarlo senza pause per più di 30 minuti e di lasciare riposare il prodotto per lo stesso tempo di utilizzo prima di utilizzarlo nuovamente.
5. Assicurarsi che la testina sia saldamente in posizione prima di avviare il prodotto.
6. Include 4 testine di massaggio da utilizzare in base alla zona del corpo.
7. Per indossare, rimuovere o cambiare la testina, l'apparecchiatura deve essere spenta prima di effettuare questa operazione.

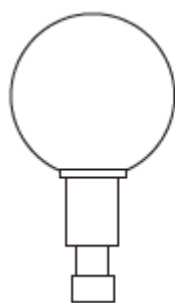


**Testa a sfera:**  
Per massaggiare braccia, schiena, glutei, cosce e polpacci.

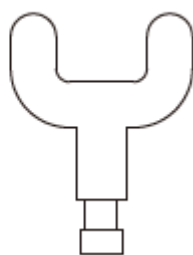

**Testa a U:**  
Per il massaggio di collo, schiena e tendine d'Achille.



**Testa a proiettile:**  
Per il massaggio dei tessuti profondi.

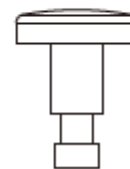

**Testa piatta:**  
Per rilassare qualsiasi parte della muscolatura.

## IV. Ricarica della batteria

- Caricare completamente il prodotto prima dell'uso.
- Collegare il cavo USB a un adattatore a muro.
- L'indicatore di carica della batteria sul display indica che la batteria è in carica e smette di lampeggiare quando è completamente carica.
- Quando l'icona della batteria sul display rimane su una sola riga e inizia a lampeggiare a intermittenza, significa che il prodotto deve essere ricaricato a causa della batteria scarica.
- Prima di caricare il prodotto, lasciarlo raffreddare in modo che la batteria sia in condizioni ottimali di carica. In questo modo si prolunga la durata del prodotto e si evitano guasti.
- Non caricare la batteria quando è ancora calda.
- Tempo di ricarica circa 4,5 ore.
- Una volta caricato, scollegare la spina dalla parete.
- Se non si dispone di una presa di corrente, è possibile caricare la batteria a 12 V, anche se i tempi di ricarica saranno più lunghi.

## V. Specifiche tecniche

DIMENSIONI	255 x 148 x 70 mm
PESO	875 grs
TIPO DI BATTERIA	LI-on
MODELLO	OD882
TEMPO DI RICARICA	4,5h a 220v
IMPULS	5V 2A

## VI. Caratteristiche

Physio Gun PRO è un rilassatore di rigidità muscolare creato per il massaggio muscolare dopo l'esercizio. Aiuta a ridurre la rigidità muscolare e ad alleviare l'affaticamento muscolare. Accelera la circolazione sanguigna e contribuisce a migliorare la salute generale dei tessuti muscolari del corpo.

## VIII. Garanzia

Garantiamo questo prodotto per 2 anni contro qualsiasi difetto di fabbricazione. Non garantiamo questo prodotto se:

- È stato riparato o manomesso da personale estraneo al nostro servizio tecnico.
- Se è stato utilizzato in modo improprio al di fuori delle raccomandazioni del presente manuale d'uso.
- Se è bagnato all'interno.
- Se è stato colpito da una caduta che ha causato danni all'interno.
- Se è stato utilizzato con accessori non inclusi nella confezione.
- Se è stata caricata a una tensione superiore a 220 V.

IMPORTATO E DISTRIBUITO DA:

Sistemas Avantia s.l.

CIF: B85859692

Clara del Rey 55.

28020 Madrid

[info@sistemasavantia.com](mailto:info@sistemasavantia.com)